


NOUS PRENONS SOIN DE VOUS

Clinique CHC MontLégia
bd Patience et Beaujonc 2
B-4000 Liège

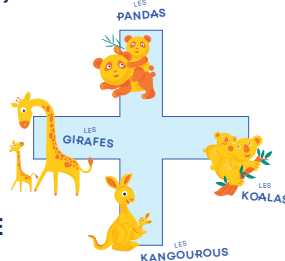

NÉONATOLOGIE
04 355 55 40

Secrétariat
04 355 56 21

Soins intensifs
Panda : 04 355 55 57
Girafe : 04 355 55 56

Soins intermédiaires
Koala : 04 355 55 42

Unité kangourou
Infirmier(e)s : 04 355 55 65
Sage-femmes : 04 355 55 45

Toutes nos fiches explicatives
sur www.CHC.be




com-mle-néonad-monto-A5-1_06 03 2026

LE MONITORING CARDIO-RESPIRATOIRE INFOS PRATIQUES



En néonatalogie, un monitoring cardio-respiratoire est un dispositif médical essentiel qui permet de surveiller en continu les signes vitaux des nouveau-nés.

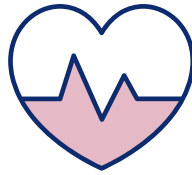

COMMENT FONCTIONNE UN MONITORING CARDIO-RESPIRATOIRE ?

Le monitoring repose sur des capteurs placés sur le bébé qui enregistrent en temps réel plusieurs paramètres vitaux :

- La fréquence cardiaque (**ligne verte**) : mesurée grâce à des électrodes collées sur la poitrine du bébé. Elle indique le nombre de battements du cœur par minute (BPM).
- La fréquence respiratoire (**ligne jaune**) : enregistrée à partir des mouvements thoraciques détectés par les électrodes. Elle indique le nombre d'inspirations par minute.
- La saturation en oxygène (**ligne bleue**) : mesurée grâce à un capteur de saturation fixé sur le pied ou la main du bébé. Il évalue le taux d'oxygène dans le sang en pourcentage.

Tous ces paramètres sont surveillés à distance dans le bureau des infirmier(e)s où une centrale de monitoring enregistre les données de toutes les chambres.



COMMENT DÉBRANCHER VOTRE BÉBÉ DU MONITORING ?



Avant de débrancher votre bébé du monitoring, sans déclencher toutes les alarmes, il faut :
→ l'autorisation du personnel soignant
→ que votre bébé soit sans assistance respiratoire

DEUX MÉTHODES

Méthode 1

- 1 Déconnectez les électrodes.
- 2 Déconnectez le câble de saturation (et pas seulement retirer la petite bandelette du pied du bébé). Les deux câbles doivent être entièrement libres, sinon les alarmes se remettront en marche.
- 3 Attendez que les courbes aient entièrement disparu de l'écran.
- 4 Pour terminer, appuyez distinctement 3 fois sur la petite sonnette orange en bas à droite de l'écran.



Méthode 2

- 1 Appuyez sur la case avec le prénom de votre bébé (en haut à droite).
- 2 Appuyez sur « En attente ».
- 3 Appuyez sur « Préparation mode attente ».
- 4 Débranchez les câbles comme décrit dans la méthode 1.

